



Choice of Millions of  
Dentists Worldwide

Dental Airflow Cihazı

# AP-H AP-H Plus

Rahat Temiz Hafif Kolay  
Temizlik Modu



## Ergonomik tasarım Daha esnek ve hafif

Kolay ve hızlı bağlantısı sayesinde hızlıca takın ve kullanmaya başlayın  
Hafif tasarımı sayesinde eliniz yorulmaz.

Tüm dental ünitler için uygundur.

Ağırlığı yaklaşık 125g'dir, piyasadaki benzer ürünlerden çok daha düşüktür (135-165g) .

Kolay açılı ayarı, esnek kullanım.

404,5€  
+KDV



Suprajinjival & Subjinjival modu  
ikisi bir arada



0.7mm küçük kalibreli nozül



Üç bölümlü  
air-polishing piyasemen tasarımı



360° döndürülebilir  
Önceden bükülebilir subjinjival nozül



Lateral şeffaf toz kabı  
kalan tozun daha kolay  
gözlemlenmesini sağlar



Cihazın ağırlığı  
yaklaşık 125g'dir



Ulusal patentli tasarımı ile  
Daha bilimsel Daha verimli

Suprajinjival & subjinjival modu  
İkisi bir arada

Subjinjival modu ile  
benzersiz dental air polisher  
(havalı parlatıcı)

## 0.7mm küçük kalibreli nozül

**Daha konsantre toz çıkışı**  
**Daha doğru ölçek**

Toz ölçümleri için nozül kalibresi 0.7mm Su ölçümleri için nozül kalibresi 1.4mm  
Daha küçük kalibre, daha konsantre air polishing (havalı parlatma) sağlar 0,7 mm  
küçük kalibreli ağızlığa sahip dental air polisher (havalı parlatıcısı) olan piyasadaki  
şirketler arasında Woodpecker, EMS ve NSK bulunmaktadır.

1 . 4mm

0 . 7mm






**360° döndürülebilir**

**Önceden bükülebilir subjinjival nozül**

Üç yönlü toz çıkışı  
Tek yönlü su çıkışı  
Biyofilmleri verimli bir şekilde ortadan kaldırın  
Kör uçları tamamen temizleyin

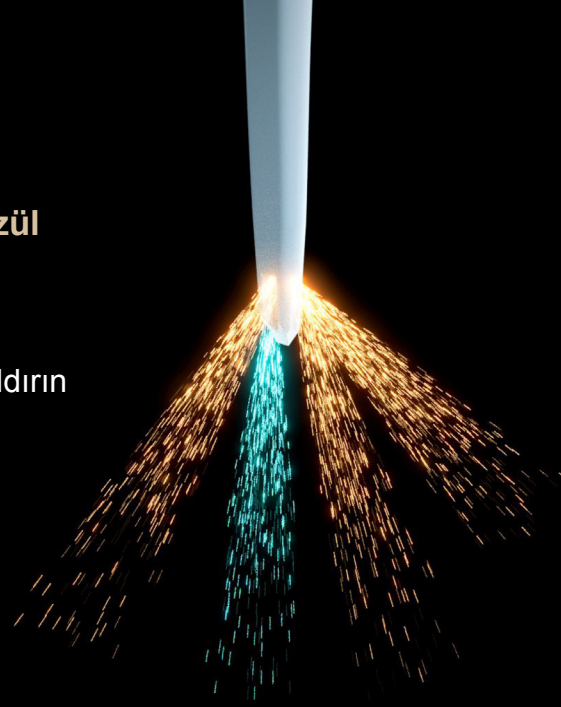

**Üç bölümlü air polishing piyasemen tasarımı**

**Parçaları ayrılabilir piyasemen**

Woodpecker piyasemenin, tıkanma olursa bakım yapmak için parçaları ayrılabilir, bu da onu tüm markalar arasında benzersiz kılar.



**Kullanıcı dostu tasarım**

Lateral şeffaf toz kabı, kalan tozun daha kolay gözlemlenmesini sağlar.







**Siyah ve altın renkli tasarım,  
daha fantastik bir görünüm sağlar.**

## Air polishing çağında bir öncü

### Neden air polishing seçilir?

Air polishing, dişte tutunan cisimleri (biofilm, pigment, yumuşak kir vb.) çıkarmak ve diş yüzeyini temizlemek için air polishing cihazları aracılığıyla diş yüzeyine toz ve su püskürtmek için basınçlı hava kullanılması işlemidir.


Air polishing, yeni çağda biofilm kontrolü için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Geleneksel ultrasonik ölçekleme ile karşılaştırıldığında, air polishing daha verimli ve rahattır, diş yüzeyinde çizilmeye neden olmaz ve yumuşak dokulara zarar verme olasılığı daha düşüktür, böylece hastanın gerilmesi için bir neden kalmaz.





- ① Subjival nozül, kurulumdan sonra 360° döndürülebilir. Farklı açıları ayarlayarak dil tarafı, dudak tarafı ve diğer boşlukları temizleyebilir. Daha kapsamlı subjival periodontal air polishing sağlar.
- ② Önceden bükülebilir subjival nozül tasarımı, kör uçları temizlemeyi kolaylaştırır.
- ③ Toz için üç yöne ve su çıkışı için bir yöne sahip subjival nozül Minimum boyut sadece 0,25 mm'dir


## Air polishing etkileri

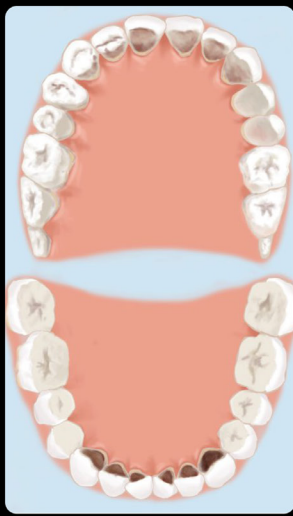

Air polishing öncesi



Air polishing sonrası

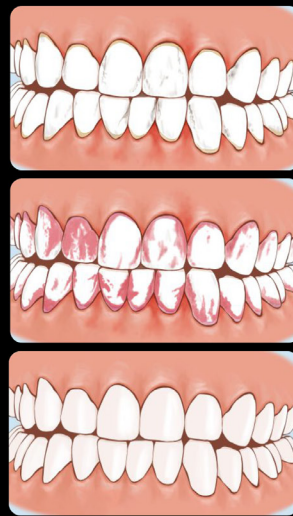

Air polishing öncesi


Biofilm görüntüsü

Air polishing sonrası

## Diş yüzeyinde etkin koruma




Aşırı miktarda biofilm

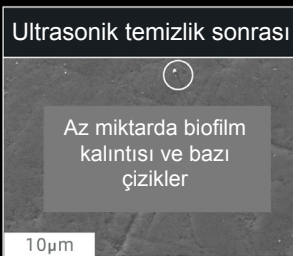

Ultrasonik temizlik sonrası

Az miktarda biofilm kalıntısı ve bazı çizikler

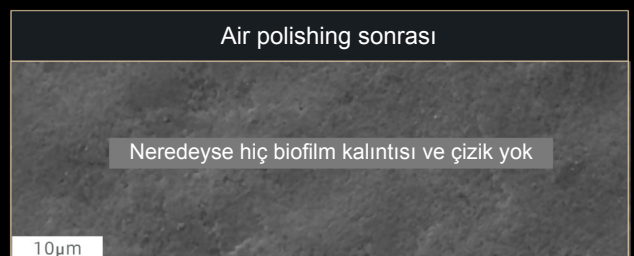

Air polishing sonrası

Neredeyse hiç biofilm kalıntısı ve çizik yok

Air polishing tozunun sertliği, mineden çok daha düşüktür. Bu nedenle, aşırı geleneksel diş taşı temizliğinin neden olduğu diş yüzeyindeki hasara neden olmaz, dişlerimiz temizlik sırasında daha iyi korunabilir böylece hastaların deneyimini geliştirir ve işlem onayını hızlıca vermelerine yol açar.





Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.  
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech  
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China  
Sales Dept.: +86-773-5873196  
E-mail: woodpecker4@glwoodpecker.com  
Website: <http://www.glwoodpecker.com>



MedNet EC-Rep GmbH  
Borkstrasse 10·48163 Muenster·Germany

ZMN-XC-060

#### DAĞITICI

*dünya*  
dental  
“Gülmeye Odaklanın”

#### ANKARA OFİSİ

Dr. Mediha Eldem Sk. No: 68/16  
Kızılay-ANKARA  
Tel : (0312) 430 55 16 (pbx)  
Faks : (0312) 430 55 17

#### İSTANBUL OFİSİ

Mollaah Gürani Mah. Oğuzhan Cad.  
No:13/1 Fatih/İSTANBUL  
Tel : (0212) 491 10 88 (pbx)  
Faks : (0212) 491 10 89