

DTE®

2023 Ürün Katalođu
Çin



Dr. Talal's Endo Kit

By. Dr. Talal Al-Nahlawi

144 €
+KDV



DTE

S6 LED

Işıklı Endodontik Kavitrone Cihazı

Dr. Talal's Kit, S6 kavitrone cihazı için özel olarak geliştirilmiş ekstra bir uç setidir.



439 €
+KDV

O-light MAX

Led Işık Cihazı

Yüksek odaklı ışık çıkışı

Geniş spektrum

Yükseltilmiş ışık yoğunluğu

208 €
+KDV




1 SEC FOR CURING

Yükseltilmiş odaklı ışık çıkışı

Odaklanmış ışık çıkışının benzersiz Woodpecker teknolojisi, ışık açısını %55,85 azaltarak daha konsantre enerji ve daha yüksek kürlleme verimliliği sağlar.



US A Brand ile iLed karışımı

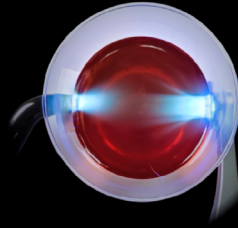

US B Brand ile iLed karışımı

DTE


Yükseltilmiş ışık yoğunluğu

iki seçim modu; 2300 mw/cm² maksimum ışık yoğunluğu ile, 2 mm reçineyi 1 saniyede kürler, bu da onu özellikle ortodontik braketler, porselen kaplamalar ve post yapııştırıcılarına göre uygular.

Yükseltilmiş geniş spektrum

iLed plus Geniş Spektrumlu Kürlleme Işığının emisyon dalga boyu aralığı 385nm-515nm'dir ve esas olarak 385nm-420nm dalga bandını ekler. Ek bant, TPO, Tetric N-Ceram Bulk Fill (Ivoclar), Amelogen Plus (Ultradent) ve Ena Hri (Micerium) gibi yeni stil fotobaşlatıcılar içeren reçine malzemelerini daha iyi kürleyebilir. Ek dalga bandı, reçine dökülmesi ve eksik kürlenme riskini de azaltabilir.

iLed plus Spektral Eğrisi ve Reçine Spektral Soğurma

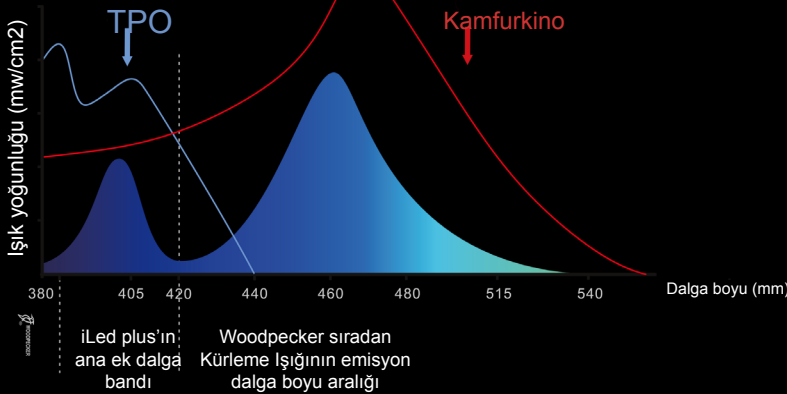

Geleneksel malzemelerin (yukarıdaki kırmızı çizgiyle gösterilen kamfurkinon içeren) ışık emici tepe noktası 460 nm'dir, bu nedenle kürlleme hem normal Kürlleme Işığı hem de Geniş Spektrumlu Kürlleme Işığı ile yapılabilir. Ancak kamfurkinon sarımtıraktır ve ağartılmış reçineye veya açık renkli reçineye çok miktarda eklenmesi uygun değildir. Yeni malzemenin ışık emici tepe noktası (yukarıdaki mavi çizgi olan TPO dahil) 405 nm'dir. iLed plus, bu malzemeleri daha iyi kürleyebilen 385nm-420nm'lik ek dalga bandına sahiptir. TPO beyazdır ve ağartılmış reçinelere ve açık renkli reçinelere ilave edilmeye uygundur.

1 SN'DE
KÜRLEME

Size yeni bir deneyim sunar

SABİT GÜÇ ÇIKIŞI

Diş restorasyonu için üretildi

AKIŞKAN TASARIM

Daha iyi tutuş hissi

360° KÜRLEME

Her açıya ulaşır

1 SN'de KÜRLEME

2mm reçine

Endo Free

Fırçasız Endomotor Cihazı

DTE

Hafif Piyasemen
Kolay hazırlık

Fırçasız motor
Yüksek enerji

Fırçalı motora göre 10 kat fazla
hizmet ömrü

577,5€
+KDV



Hafif kablosuz piyasemen daha iyi bir tutuş hissi sunar



Ağırlık: 106.8g (piyasemen+anguldurva)

Kordon kısıtlaması olmadan piyasemeni kablosuz sinyalle kontrol edin.

İyi dengelenmiş tasarımı, daha kolay hazırlık sağlar.

4 çalışma modu, daha güvenli ve daha verimli hazırlığı garanti eder

İleri dönüş modu / Geri dönüş modu
Pistonlu mod / ATR modu

ATR modu


Eğme, önceden ayarlanmış torqa ulaştıktan sonra ayarlanan açı başına resiprok hareket eder. Dönme açısının doğru kontrolü, aletin ayrılma riskini azaltır ve daha verimli hazırlık sağlar.



10° aralıklı ayarlanabilir resiprok hareket açısı

Resiprok hareket açısının ayar aralığı: 20°-400°

Dönme açısının doğru kontrolü, cihazın ayrılma riskini azaltır ve daha verimli ve daha güvenli hazırlık sağlar.

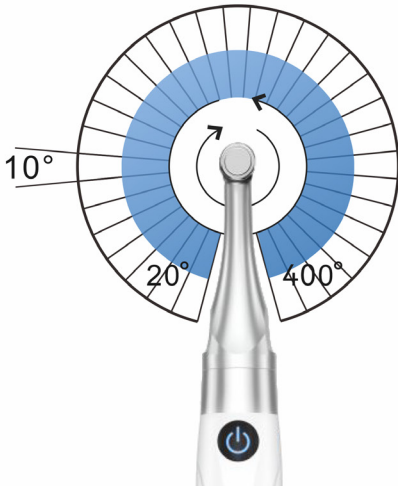

Apex Locator'a (Uç Bulucu) bağlanabilir



6:1 mini anguldurva daha geniş çalışma alanı sağlar

Kompakt ama güçlü 6:1 hız oranı, yüksek tork uygulaması altında düşük hız ve stabil dönüş sağlar.

Başlık yüksekliği: 9.7mm

Başlık çapı: 8mm

Boyun çapı: 6mm

360° dönebilen anguldurva

Daha esnek çalışma, farklı pozisyonlarda dişlerin hazırlanmasını kolaylaştırır.

AP-H Airflow Cihazı

DTE

Kolay ve hızlı bağlantısı sayesinde hızlıca takın ve kullanmaya başlayın
Hafif tasarımı sayesinde eliniz yorulmaz.



404,5€
+KDV



Suprajival & Subjival modu
ikisi bir arada



0.7mm küçük kalibreli nozül



Üç bölümlü
air-polishing piyasemen tasarımı



360° döndürülebilir
Önceden bükülebilir subjival nozül



Lateral şeffaf toz kabı
kalan tozun daha kolay
gözlemlenmesini sağlar



Cihazın ağırlığı
yaklaşık 125g'dir

Yeni Nesil Doğru Sonuçtan Daha Fazla

DPEX V

Apex Bulucu Cihaz

Daha stabil, daha güçlü hatalı veri önleme özelliği

25 Ulusal Patent 8 İcat Patenti

346,5€
+KDV



Fi - P



2 saniye ısıtma süresi

Yüksek performanslı dönüş sistemi, verimli bir kesim performansı sağlar



0.35mm eğimli uç

Daha ince uçlar, dar kök kanalının derinliklerine nüfuz ederek size daha iyi bir tedavi etkisi sağlar.




Ürün fiyatı

578€
+KDV



Yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü

Sabit sıcaklık aşırı ısınmayı önler.

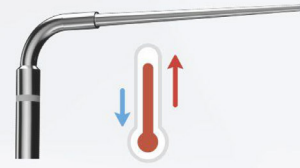

4 ayrı çalışma sıcaklığı

150°C, 180°C, 200°C, 230°C, piyasadaki farklı gutta-percha markaları ile eşleşebilir.



4 saat dayanıklılık

Yüksek kapasiteli bataryası ve özel ısıtma sistemi, tam dolu şarjla 1500 işlem sağlar.



Tip

Çap

Sivri Uç

| | | |
|---------|--------|------|
| WP3504 | 0.35mm | 0.04 |
| WP4004 | 0.40mm | 0.04 |
| WP4504 | 0.45mm | 0.04 |
| WP5004 | 0.50mm | 0.04 |
| WP5506 | 0.55mm | 0.06 |
| WP5508 | 0.55mm | 0.08 |
| WP5510 | 0.55mm | 0.10 |
| WP6072 | 0.60mm | 0.12 |
| WP5508L | 0.55mm | 0.08 |

Fi-G: 0°C-230°C için Süre (S)

**Woodpecker
markası**

15

**Korean B
markası**

24

**Chinese C
markası**

51

**Chinese D
markası**

56



DTE

Fi - G



15 saniye içinde hızlı ısıtma

Bekleme süresini azaltır ve çalışma verimliliğinizi artırır.



Ürün fiyatı

578€
+KDV



Gutta-percha sızıntısını önler

360 dönebilen iğne

Optimize edilmiş yapısı, 360° üniform dönüş özelliğiyle, gutta-percha sızıntısını etkili bir şekilde önler.




0.5mm enjeksiyon iğnesi

Kolay ulaşılan apikal 3mm kanal daha iyi bir dolgu sağlar.



Geri dönüş önleyici yapıya sahip itme silindiri

Mekanik kilitleme yapısı, itme silindirinin geri dönmesini engeller ve boşlukların oluşmasını önler.

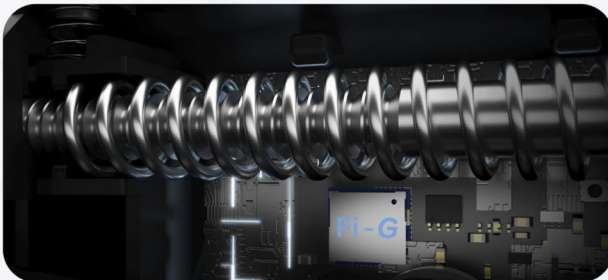

| Tip | Boyut | Uzunluk |
|----------|-------|---------|
| 20G 22mm | 20G | 22mm |
| 20G 24mm | 20G | 24mm |
| 20G 28mm | 20G | 28mm |
| 23G 24mm | 23G | 24mm |
| 23G 28mm | 23G | 28mm |
| 25G 24mm | 25G | 24mm |

Fi-G

Fi-P

Fi-G 15 saniyelik en kısa ısıtma ve erime süresini sağlar.

DTE



Gutta-percha Obtürasyon Sistemi

Fi-G

0.5mm enjeksiyon iğnesi

Gutta-percha sızıntısını önler
360 derece dönebilen
enjeksiyon iğnesi

15 saniyede hızlı ısıtma

Geri dönüş önleyici yapıya
sahip itme silindiri

Fi-P

0,2 saniyede hızlı ısıtma

0,35 mm eğimli uç

N2 LED

Işıklı Ünite Monte Kavitrone Cihazı

DTE



202 €
+KDV

Bize Ulaşmak İsterseniz...

✉ info@dunyadental.com

dünya
dental

“Gülmeye Odaklanın”

www.dunyadental.com



Satış noktalarımıza
web adresimizden ulaşabilirsiniz.

TOKUYAMA DENTAL ANKARA OFİSİ

Dr. Mediha Eldem Sk. No: 68/16
Kızılay-ANKARA
Tel : (0312) 430 55 16 (pbx)
Faks: (0312) 430 55 17

TOKUYAMA DENTAL İSTANBUL OFİSİ

Mollah Gürani Mah. Oğuzhan Cad.
No:13/1 Fatih / İstanbul
Tel : (0212) 491 10 88 (pbx)
Faks: (0212) 491 10 89

Bizi Takip Etmek İsterseniz...

f /dunyadental

t /dunyadental

i /dunyadental

Bu Kısım Önemli!

Bu katalogta yer alan ürün resimleri, açıklamaları, ambalajları, fiyatları ve benzeri konularda yapılan tipografik hatalardan DÜNYA DENTAL LTD. ŞTİ. sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda DÜNYA DENTAL LTD. ŞTİ. kayıtları geçerlidir. Katalogdaki resimler bilgi amaçlıdır. Zamanla ürünlerin ambalaj ve dizaynı değişebilir. Bu nedenle resimler bağlayıcı değildir.